

# Kieliluettelo

01. englanti / 13. ranska / 25. saksa / 37. tanska  
/47. espanja / **59. SUOMI** / 69. japanilainen  
/ 81. hollanti / 91. norja / 101. ruotsi

**Tutustu.** ----- 02

**Aloita.** ----- 03

- Lataaminen.
- OrCam Read -laitteen käynnistäminen.
- Keskeytystilaan siirtyminen.
- Keskeytystilan lopettaminen.
- OrCam Read -laitteen sammuttaminen.
- Äänenvoimakkuuden asettaminen.
- Ääniasetukset-valikon vaihtoehdot.
- Bluetooth-yhteys.
- MobiilISOVELLUS.
- Yhdistäminen WiFiin ja ohjelmistopäivityksiin.




**OrCam Read -ominaisuudet.** ----- 08

- Lukeminen laukaisupainiketta käyttämällä.
- Lukemisen ohjaaminen.
- Laser-osoitintilat.
- Vyöhykkeen ja ajan sekä ajan ja päivämäärän ilmoituksen asetus.

**Ehdot ja edellytykset.** ----- 09

**Turvallisuus ja varoitukset.** ----- 10

# Tutustu.

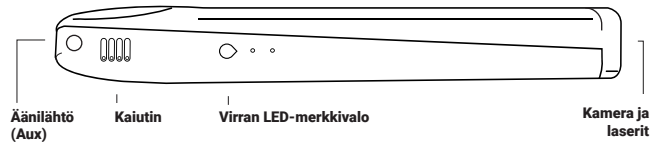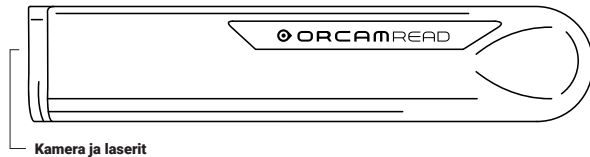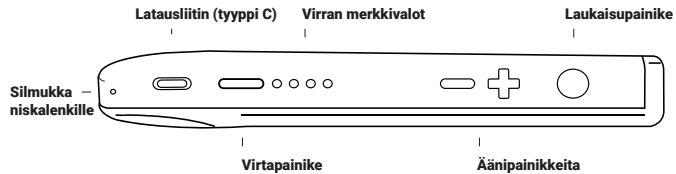

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

- OrCam Read -laite
- Käyttöopas
- Latauskaapeli
- Laturirasia
- Johdolliset kuulokkeet
- Puhdistusliina
- Naru

# Aloita.

## Ohjeita verkossa.

☰ Löydät lisää tietoja OrCam-käyttäjäsivuilta. Käy sivuillamme osoitteessa [www.orcam.com/user-area](http://www.orcam.com/user-area) ja tutustu perusteelliseen käyttöoppaaseen, vinkkeihin, neuvoihin ja vianmääritykseen.

## Lataaminen.

OrCam suorittelee lataamaan laitetta ennen ensimmäistä käynnistyskertaa vähintään kolme tuntia. OrCam Read latautuu täyteen seuraavilla latauskerroilla 90 - 120 minuutissa. OrCam Read -laitteen lataaminen:

1. Työnnä johto OrCam Read -laitteen tyyppin C liittimeen.
2. Kytke USB-pää laturiin ja laturi sähköpistorasiaan.

## Käynnistä ja sammuta OrCam Read -laitteesi.

- OrCam Read käynnistetään painamalla ja pitämällä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Kun laite "herää", kuulet viestin "OrCam Read versio [xx] on valmis. Akun lataus on [xx] prosenttia".
- Keskeytystilaan siirrytään painamalla virtapainiketta kerran. Kuulet hälytysäänen ja viestin "Keskeytetään. Sammuta painamalla uudestaan", ja sitten viestin "Keskeytetty", kun laite siirtyy keskeytystilaan.
- Voit poistua Kesteytystilasta joko painamalla virtapainiketta tai painamalla laukaisupainiketta kerran. Kuulet hälytysäänen ja viestin "Herääminen käynnissä. Akun lataus on [xx] prosenttia".
- OrCam Read sammutetaan painamalla virtapainiketta kerran. Kuulet hälytysäänen ja viestin "Keskeytetään. Sammuta painamalla uudestaan". Paina virtapainiketta uudestaan. Kuulet

hälytysäänen ja viestin "Sammutus käynnissä, odota". Kun yksikkö sammuu, kuulet viestin "Sammutus. Näkemiin".

## Äänenvoimakkuuden asettaminen.

- Äänenvoimakkuutta lisätään painamalla pluspainiketta ("+").
- Äänenvoimakkuutta lasketaan painamalla miinuspainiketta ("-").

## Ääniasetukset-valikon vaihtoehdot.

OrCam Read -laitteen asetusten muokkaaminen audioasetusvalikon kautta Pääset ääniasetukset-valikkoon painamalla ja pitämällä virtapainiketta painettuna, painamalla mitä tahansa äänenvoimakkuuspainiketta ja sen jälkeen vapauttamalla virtapainikkeen. Kun olet äänenvoimakkuuden asetukseksi, laukaisupainikkeen painaminen kerran vahvistaa valitun vaihtoehdon. Voit selata vaihtoehtoja painamalla kumpaa tahansa äänenvoimakkuuspainiketta. Painettaessa

laukaisupainiketta nopeasti kaksi kertaa laite joko siirtyy takaisin päävalikkoon tai poistuu ääniasetusvalikosta.

### **Vaihtoehtojen ja komentojen koko luettelo.**

Täydellisen luettelon asetusvaihtoehdoista ja OrCam, ole hyvä -komennoista saat käyttöohjeesta OrCam-verkkosivujen käyttäjäalueelta.

### **Bluetooth-yhteys.**

Käytä Bluetooth-yhteyttä yhdistääksesi OrCam Read -laitteesi ulkoiseen kaiuttimeen tai kuulokkeisiin.

1. Kaiuttimessa tai kuulokkeissa:
  - A. Paina Bluetoothin laiteparin muodostaminen -painiketta. Saat äänivastauksen kaiuttimesta tai kuulokkeista.
2. OrCam Read -laitteellasi:
  - A. Siirry ääniasetusten valikkoon. Mene yhteysasetusvalikkoon ja sitten Bluetooth-asetusvalikkoon.

- B. Valitse "Yhdistä Bluetooth- äänilaitteeseen painamalla laukaisupainiketta. Pääset muihin asetuksiin painamalla äänipainikkeita". OrCam Read esittää luettelon kaikista käytettävissä olevista Bluetooth-laitteista.
- C. Voit selata Bluetooth-laitevaihtoehtoja painamalla äänenvoimakkuuspainikkeita. Valitse painamalla laukaisupainiketta laite, jonka haluat yhdistää.
- D. Osa Bluetooth-kaiuttimista tai kuulokkeista antaa ilmoituksen "yhdistetty".

**Huom:** Kun OrCam MyEye on yhdistetty Bluetooth-kaiuttimeen tai kuulokkeisiin, äänenvoimakkuutta säädetään the kuulokkeiden tai kaiuttimen äänenvoimakkuuspainikkeilla, ei OrCam Read -laitteen äänenvoimakkuuden plus- tai miinuspainikkeilla.

### **Mobiilisovellus.**

OrCam Read -sovelluksen avulla voit mukauttaa omia OrCam Read -asetuksia, ohjata lukemisen ohjaamista ja löytää laitteesi, jos se katoaa. Sovellus on tällä hetkellä saatavana vain iPhone- ja iPad-käyttäjille.

1. Hae ja lataa OrCam Read -sovellus oman iPhone-laitteesi App storesta.
2. Kytke iPhonen Bluetooth päälle.
3. Noudata näytölle tulevia ohjeita laiteparin yhdistämiseen.

### **Yhdistäminen WiFiin ja ohjelmistopäivityksiin.**

OrCam Read -laitteen yhdistäminen WiFi-verkkoon varmistaa, että laitteellesi asentuu uusin ohjelmistopäivitys koko tajuujaja. Laite on myös kytkettävä laturiin koko latausprosessin ajaksi, jotta ohjelmistopäivitykset voidaan vastaanottaa. Huomaathan, että OrCam Read tukee vain 2,4 Ghz:n WiFiä, ei 5 Ghz:n WiFiä. WiFi-verkkoosi yhdistäminen:

1. Tietokoneellasi tai älypuhelimellasi:
  - A. Mene osoitteeseen [www.orcam.com/wifiset](http://www.orcam.com/wifiset)
  - B. Noudata näytölle ilmestyviä ohjeita WiFi-verkkosi asettamiseksi.
  - C. Näytölle ilmestyy QR-koodi.
2. OrCam-laitteellasi:
  - A. Yhdistä OrCam Read laturiin.
  - B. Pidä OrCam Read -laitetta näytön edessä (tietokoneen näytön koko noin 12-16 tuumaa (30-40 cm), älypuhelimien noin 6-8 tuumaa (15-20 cm) QR-koodin skannaamista varten.
  - C. Osoita OrCam Read -lukijan OrCam, ole hyvä -komentoa ja näytöllä olevaan QR-koodiin. Käynnistä laukaisupainiketta.
  - D. OrCam Read soittaa merkkiään ja päästää useita piippauksia samalla, kun se skannaa QR-koodia ja yhdistää WiFi-verkkoon. Laite ilmoittaa, kun se on yhdistetty.

# OrCam Read -ominaisuudet.

## Lukeminen laukaisupainiketta käyttämällä.

1. Pidä OrCam Read paikallaan ja osoita sillä suoraan tekstiin noin 15-35 cm:n (6 - 14 tuuman) etäisyydeltä. Varmista, että laitteen pitkä sivu kaikkine painikkeineen osoittaa ylös.
2. Lukemiseen laukaisupainikkeen avulla on kaksi tapaa:
  - Painamalla laukaisupainiketta kerran voit ottaa kuvan koko näkyvillä olevasta tekstistä.
  - Voit lukea tarkempaa tekstiä laserosoittimilla.
  - A. Paina ja pidä laukaisupainiketta painettuna, mikä aktivoi laserosoittimen, jolloin reunalaserkehys tai hiiren laserosoitin suunnataan tekstiin.

- B. Säädä reunalaserkehystä tai hiiren laserosoitinta halutun tekstin sieppaamiseksi.
  - C. Vapauta laukaisupainike. Kuulet kameran laukaisua muistuttavan äänen, kun OrCam Read ottaa kuvan tekstistä.
3. OrCam Read päästää useita piippauksia käsitellessään tekstiä. Laite alkaa lukea tekstiä, ja tekstin luettuaan se soittaa äänimerkin.

**Huom:** Jos sormeasi ei vapauteta ennen kuin 5 sekuntia on kulunut, kamera ei aktivoidu.

## Lukemisen ohjaaminen.

- Voit keskeyttää lukemisen ja jatkaa sitä painamalla laukaisupainiketta kaksi kertaa.
- Seuraava lause voidaan ohittaa painamalla äänenvoimakkuuden pluspainiketta ("+") kerran.
- Palaa edelliseen lauseeseen painamalla äänenvoimakkuuden miinuspainiketta ("-") kerran.

- Lukeminen lopetetaan painamalla laukaisupainiketta kerran.
- Kun OrCam Read on lopettanut lukemisen, se antaa merkkiään.

### **Laser-osoitintilat.**

Voit vaihtaa laser-osoitintilaan painamalla samaan ainaan äänenvoimakkuuden plus- ja miinuspainikkeita.

Laser-osoitintiloja on kaksi:

- "Raja" kehystetyn tekstin lukemiseen.
- "Hiiri" lukemisen aloittamiseen tietyistä kohdasta.

**Huom:** OrCam Read sieppaa valitun tekstin, kun olet painanut ja pitänyt laukaisupainiketta painettuna 5 sekuntia. Jos sorme ei vapauteta ennen kuin 5 sekuntia on kulunut, kamera ei aktivoidu.

### **Vyöhykkeen ja ajan sekä sekä ajan ja päivämäärän ilmoituksen asetus.**

1. Aseta sisäinen aika käymällä Ajan asetus -sivulla verkko-osoitteessa: [www.orcam.com/timeset](http://www.orcam.com/timeset).

2. Paina laukaisupainiketta ja lue komento "OrCam, ole hyvä aseta vyöhyke ja aika" -komento näytöltä.
3. Kuulet kulloisenkin kellonajan näyttämällä osoittamisliikettä ja lukemalla seuraavan komennon:  
**OrCam, ole hyvä kerro kellonaika**
4. Kuulet kulloisenkin viikonpäivän ja päivämäärän näyttämällä osoittamisliikettä ja lukemalla seuraavan komennon:  
**OrCam, ole hyvä kerro päivämäärä**
5. Muutaman sekunnin kuluttua OrCam Read kertoo sinulle senhetkisen ajan ja/tai päivämäärän.

## Ehdot ja edellytykset.

OrCam-laitteesi ("Tuote") ja mobiilisovelluksesi käyttöön sovelletaan käyttöehtoja, jotka löytyvät osoitteesta [orcham.com/terms-and-conditions](https://www.orcham.com/terms-and-conditions). Sinun hyväksyntäsi näille käyttöehdoille on tuotteen käyttösi ehtona.

Ole hyvä ja lue käyttöopas kokonaisuudessaan, myös tärkeät turvallisuustiedot, ennen kuin käytät OrCam-laitettasi. OrCam-laitetta EI SAA käyttää, ennen kuin olet saanut henkilökohtaisen koulutuksen tai verkkokoulutuksen valtuutetulta OrCam Trainer™ -kouluttajalta tai OrCam-koulutusohjelmalta.

OrCam ei ota mitään vastuuta, jos tuotetta käytettiin muutoin kuin käyttöoppaan sisältämien ohjeiden mukaisesti. Tuotteisiin ei tule turvautua olosuhteissa, jotka ovat mahdollisesti hengenvaarallisia tai terveyttä vaarantavia tai jotka voisivat johtaa taloudelliseen menetykseen. OrCam-laitteisiin ei erityisesti tule turvautua silloin, kun ajetaan ajoneuvolla tai käytetään minkäänlaisia raskaita koneita. OrCam ei ole vastuussa siinä tapauksessa, että tuotteita käytetään tällaisissa tilanteissa.

OrCam saattaa saada tietoa kolmansilta osapuolilta (esim. elintarvikkeiden viivakoodit tietyissä maissa). OrCam on saanut Australian ja Uuden-Seelannin elintarvikkeiden viivakooditiedot GS1 Australialta. OrCam ei ole vastuussa virheettömydestä viivakooditiedoissa, jotka on saatu kolmansilta osapuolilta.

## Yksityisyydensuoja.

OrCam kunnioittaa käyttäjän oikeutta yksityisyyteen, ja olemme sitoutuneet suojelemaan ja turvaamaan asiakkaidemme ja käyttäjiemme henkilötietoja. Meidän tietosuojakäytäntömme osoitteesta <https://www.orcham.com/privacy-policy>, jossa kuvataan, miten OrCam Technologies, mukaan lukien sen tytäryhtiöt ja edustustot (yhdessä "OrCam" tai "Meitä" tai "Me"), käsittelee henkilötietoja asiakkaidemme ja käyttäjistämme tarjoamiensa palveluiden, verkkosivustomme ja Read -mobiilisovelluksen yhteydessä (vastaavasti "Sovellus" ja "Palvelut"), minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme, mihin tarkoituksiin käytämme ja käsittelemme henkilötietoja, miten henkilötietoja suojataan ja kenelle henkilötietoja voidaan jakaa.

Meille on tärkeää kertoa tietosuojakäytäntömme ja oikeutesi, jotka liittyvät henkilötietoihin, joita meillä on sinusta. Sinun tulisi myös olla tietoinen siitä, että käytämme evästeitä ja vastaavia tekniikoita tietojen keräämiseen ja tallentamiseen, kun käytät verkkosivujamme [www.orcham.com](https://www.orcham.com). Lisätietoja saa tutustumalla alla oleviin evästekäytäntöihimme osoitteesta <https://www.orcham.com/en/cookies-policy/>.

Jos sinusta tuntuu, että seuraavassa tietosuojalausunnossa ei ole otettu huomioon yksityisyyttäsi koskevaa huoltasi, ota meihin yhteyttä osoitteella [privacy@orcham.com](mailto:privacy@orcham.com).

Jos valitset sovelluksen lataamisen tai käytön, yhteydenpidon, rekisteröinnin tai tietojen toimittamisen meille palvelujen yhteydessä, hyväksyt nimenomaisesti tällaisten tietojen käytön tämän tietosuojalausannon mukaisesti. Et voi käyttää palveluita tai lähettää meille tietoja, jos et hyväksy mitään alla olevista ehdoista. Tätä tietosuojalauseketta ei tule tulkita millään tavoin poikkeavaksi käyttöehdoista tai muusta OrCamin ja sinun välillä tehdystä sopimuksesta.

## Takuu.

Asiakas hyväksyy, että muutoin kuin tässä nimenomaisesti mainittua, OrCam ei anna mitään esitystä tai takuuta asiakkaalle tuotetta, sen toimintoja tai sen tuottamia mahdollisia kuvia koskien.

OrCamin loppukäyttäjän rajoitettu tuotetakuu ("rajoitettu takuu") suojaa OrCam-tuotteen omistajaa materiaali- tai valmistusvirheitä vastaan tuotteen alkuperäisen hankinnan hetkellä seuraavan yhden (1) vuoden ajan sekä mahdollisen sovellettavan lakisääteisen lisätakuujakson ajan. Omistajalta vaaditaan alkuperäinen hankinnan/toimituksen todiste, jotta hän saisi tämän suojan.

OrCam korjaa tai vaihtaa harkintansa mukaan tuotteen, jonka OrCam määrittää olevan tämän rajoitetun takuun suojaama. OrCam ei ole vastuussa olosuhteista, jotka syntyvät tuotteen tahallisen vahingon tai väärinkäytön tuloksena. Omistaja on vastuussa tuotteen lähetyksistä OrCamin nimeämään sijaintipaikkaan.

Tämä rajoitettu takuu on ainoa ja poissulkeva takuu, jota sovelletaan OrCam-tuotteisiin. Millään kolmannella osapuolella ei ole valtuutusta antaa mitään esitystä, takuuta tai sopimusta OrCamin puolesta OrCamin tuotteisiin nähden. OrCam ei anna minkäänlaista tai -laatuista takuuta näiden tässä nimenomaisesti ilmaistujen lisäksi.

OrCam ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, rinnakkaisista, epäsuorista, rangaistusluonteisista, satunnaisista, välillisistä tai esimerkinomaisista vahingoista, joita esiintyy tuotteen käyttöön liittyen tai siitä johtuen. OrCamin vastuut eivät missään tapauksessa ylitä tuotteesta maksettua hintaa.

Ilman että tämän sopimuksen alaisia vastuunrajoituksen ehtoja mitenkään rajoitetaan, tässä esitetty rajoitettu takuu ei päde eikä omistaja saa hyvitystä OrCamilta mistään kustannuksista tai kuluista seuraavissa tapauksissa:

- (i) tuotetta on käytetty muutoin kuin tuotetodokumentoinnin ja käytön ehtojen tai OrCamin toimittamien muiden kirjallisten käyttöohjeiden mukaisesti
- (ii) tuote on altistettu peukaloinnille, väärinkäytölle, huolimattomuudelle tai onnettomuudelle
- (iii) tuotteen tai osien tunnistetarrat on poistettu tai tuotetta on muutoin muutettu
- (iv) tuotteen on avannut, muunnellut, korjannut, huoltanut, ylläpitänyt tai muuttanut joku muu kuin valtuutettu OrCam-edustaja
- (v) tuote on liitetty ohjelmistoon, tietokonelaitteisiin tai muihin laitteisiin, joita OrCam ei ole toimittanut tai joita valtuutettu OrCam-edustaja ei ole hyväksynyt kirjallisesti
- (vi) tuotetta on tarkoituksellisesti vahingoitettu tai se on altistettu vedelle, kuumuudelle tai korkealle jännitteelle
- (vii) tuotetta on käyttänyt henkilö, joka ei ole läpikäynyt valtuutetun OrCam Trainer™ -kouluttajan antamaa koulutusta.

Kaikki tämän takuun perusteella vaihdetut osat ovat takuun alaisia alkuperäisen takuujakson jäljellä olevan ajan tai yhdeksänkymmentä (90) päivää korjauksen päivämäärästä, kumpi näistä onkaan pitempi.

Rekisteröi laitteesi takuuta varten takuunrekisteröintiin tarkoitettulla verkkosivulla osoitteessa <https://discover.orcaml.com/warranty>.

Jos epäilet, että tuotteesi tarvitsee takuutukea, ota yhteys osoitteella [support@orcaml.com](mailto:support@orcaml.com). Olet vastuussa kuljetuskustannuksista. Jos kuitenkin määritetään, että takuupyynnö on validi, OrCam maksaa koko kulut korjatun tai vaihdetun tuotteen kuljettamisesta.

ORCAM KIELTÄÄ MAHDOLLISET JA KAIKKI TAKUUT, OLIVAT NE SITTEN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA, MUKAAN LUKIEN MM. OLETETUT TAKUUT KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA, KAUPPAKELPOISUUDESTA SEKÄ SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. ORCAM EI ANNA TAKEITA SIITÄ, ETTÄ TUOTE OLISI VIRHEETÖN TAI VIRUKSETON TAI TOIMISI KESKEYTYMÄTTÄ, ETTÄ TUOTTEEN TUOTTAMAT KUVAT TAI ÄÄNET OLISIVAT VIRHEETTÖMIÄ TAI ETTÄ TUOTTEEN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA, JA TÄTEN KIELTÄÄ MAHDOLLISEN JA KAIKEN VASTUUN TÄMÄN PERUSTEELLA. TÄMÄ OSA TÄYTÄNTÖÖNPANNAAN KOKO SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUudessa.

### Hyvityskäytäntö.

Voit palauttaa vahingoittumattoman laitteesi hyvitystä vastaan paikallisen lain edellyttämän ajan puitteissa tai OrCamin kanssa ostohetkellä tehdyn sopimuksen mukaan. Koulutusmaksut eivät ole hyvitettäviä. Ole hyvä ja ota yhteys paikalliseen edustajaan tai OrCam-tukeen hyvitysprosessin aloittamiseksi.

Jos palautat OrCam-laitteen, noudata OrCam-tuen ohjeita tarkasti. Laitteen tulee olla samassa kunnossa, kun sen vastaanotit, eikä se saa olla millään tavalla vaurioitunut. Palautuksesi ja sen tekeminen saattavat vaihdella sen mukaan, miten laite on ostettu, mikä sen kunto on ja kuinka kauan sinulla on ollut laite.

OrCam käsittelee palautuksesi vasta, kun rahdinkuljettaja on vastaanottanut laitteen ja toimittanut sen OrCamille. Laitteen vastaanottaminen kestää noin kolme viikkoa (paikallisia tullauksia sisältävissä kansainvälisissä kuljetuksissa voi kestää kauemmin), minkä jälkeen OrCam käsittelee palautuksen. Kun OrCam on hyvittänyt palautuksen, saattaa kestää vielä, että pankkisi siirtää rahan tilillesi. Luottokorttimaksuissa tämä viive voi olla 5 - 10 arkipäivää.

Jos sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä OrCam-tukeen.

### FCC-vaatimustenmukaisuus.

Tämä laitteisto on testattu ja sen on havaittu noudattavan FCC-säännösten osan 15 alaisia luokan B digitaalilaitteen rajoja. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollista häiriötä vastaan asuinalueasennuksessa. Tämä laitteisto tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Ei voida kuitenkaan taata, että mitään häiriötä ei ilmenisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, joka voidaan päätellä sammuttamalla laite ja kytkemällä se uudelleen päälle, käyttäjää kannustetaan yrittämään häiriön korjaamista jollakin tai joillakin seuraavista menetelmistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä uuteen paikkaan.
- Suurena laitteiston ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laitteisto eri sähköpiiriin pistorasiaan kuin mihin vastaanotin on liitetty.
- Kysy neuvoa jakelijalta tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.
- Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15.

Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollista häiriötä.
- (2) Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaanlukien epätoivotusta käytöstä johtuva häiriö.

### FCC-varoitus.

Muutokset, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat FCC-säännösten mukaisesti mitätöidä käyttäjän luvan käyttää laitteistoa. HUOMAUTUS: VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN RADIO- TAI TV-HÄIRIÖSTÄ, JOKA JOHTUU VALTUUTTAMATTOMISTA TÄHÄN LAITTEISTOON KOHDISTUVISTA MUUTOKSISTA. TÄLLAISET MUUTOKSET VOIVAT MITÄTÖIDÄ KÄYTTÄJÄN LUVAN KÄYTTÄÄ LAITTEISTOA.





Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan (WEEE) direktiivin mukainen  
Ota yhteys OrCamin asianmukaista hävittämistä varten.

**RoHS**

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin mukainen (materiaalit ja osat)



FCC-tunnus:  
2AAWI-READ



CE-vaatimusten mukainen



Katso käyttöoppaasta

## Turvallisuus ja varoitukset.

Lue nämä varo-ohjeet huolellisesti ennen OrCam-laitteen käyttämistä, jotta vaaralliset tilanteet vältetään ja laitteesi ihanteellinen toimintakyky varmistetaan.

Käsittele OrCam-laitteesi huolella. Se voi vahingoittua, jos se putoaa, palaa, puhkeaa tai murskautuu. Laitteen ulkokotelo ei saa avata.

OrCam-laitteen on suunniteltu toimivan ympäristön lämpötiloissa 0–40 °C sekä tavallisissa käyttöolosuhteissa (suhteellinen kosteus 10–90 % RH ja ilmanpaine enintään 2000 m merenpintatason yläpuolella (700 hPa). Laitte voi vahingoittua, jos se on näiden vaihteluvälien ulkopuolella. Säilytä ja kuljeta viileässä, kuivassa paikassa (0–40 °C) sekä suhteellisessa kosteudessa, joka on 5–90 % RH, ja ilmanpaineessa, joka on 700–1 060 hPa. OrCam-laitte ei saa vettä hylkivä, mutta ei vesitiivis. Tämä tarkoittaa, että laite voi kestää kevyttä sadetta tai tihkua lyhyitä aikoja, vaikka tätä ei suositella. OrCam-laitetta ei saa käyttää runsaassa sateessa, rannalla tai uima-altaassa eikä kylpyammeessa tai suihkussa tai kummankaan läheisyydessä. OrCam-laitetta ei saa upottaa mihinkään nesteeseen. OrCam-laitte on IP-luokituksen IP22 mukainen.

Jos OrCam-laitteen käytössä esiintyy jokin ongelma, jos pakkaus kuori tai linssi on murtunut tai jos laitteessa uskotaan olevan jotain vikaa, ole hyvä ja ota yhteys tukeen äläkä yritä korjata sitä itse. Vain pätevä OrCam-henkilökunta voi korjata tai huoltaa laitteesi. Valtuuttamattomat korjaukset voivat mitätöidä takuun. Akkua ei saa yrittää vaihtaa. Tämä voi vahingoittaa sitä, mikä voi johtaa ylikuumenemiseen ja jopa vammaan. Akun on suunniteltu kestävän keskimääräistä käyttöä kaksi vuotta (keskimäärin yksi latausjakso viikossa), jonka jälkeen se täytyy ehkä vaihtaa. Käytä vain OrCam-laitteesi mukana toimitettua laturia. Muun laturin käyttäminen voi mitätöidä takuun ja aiheuttaa vakavan vamman.

Liitintä ei saa työntää väkisin porttiin eikä painikkeeseen saa kohdistaa liiallista voimaa. Tämä voi aiheuttaa vahingon, jota takuu ei kata. Jos liitin ei asennu helposti, tarkista, onko portissa esteitä, ja varmista, että sinulla on oikea liitin kyseistä porttia varten. Laitetta ei saa liittää ohjelmistoon, tietokonelaitteisiin tai muihin laitteisiin, joita OrCam ei ole toimittanut. Laitteen altistaminen magneettikentille voi vahingoittaa laitetta tai pyyhkiä pois tietosi.

Kun käytät OrCam-laitetta tai lataat akkua, on normaalia, että laite lämpenee. Jos laite muuttuu liiallisen kuumaksi tai vuotaa tai haistat palaneen hajua, sammuta laite heti ja ota yhteys OrCam-tukeen.

Jos sinulla on erityiskysymyksiä laitteen käytöstä yhdessä sisäisen tahdistimen ja/tai defibrillaattorin kanssa, ole hyvä ja kysy neuvoa lääketieteen ammattilaiseltasi. Älä käytä OrCam-laitetta lääkkeiden etikettien lukemiseen.

## Puhdistus.

Puhdista laitteesi, jos se tuntuu likaiselta tai jos sitä siirrellään eri käyttäjien välillä. Älä koskaan kosketa kameran linssiin sormella. Puhdista linssiä vain mukana toimitetulla mikrokuituliinalla ja silmälasien puhdistusnesteellä. Älä käytä mitään hankaavia materiaaleja. Laitetta ei saa altistaa kemikaaleille, kuten kotitalouden puhdistusaineille, aerosolisumutteilille, liuottimille, alkoholille tai ammoniakille. Jos saat allergisen reaktion jollekin OrCam-laitteen osalle, ota yhteys hoitoalan ammattilaiseen.

Lasersäteilyn maksimiteho: 0,371 mW
Lähetetty aallonpituus: 635 nm
Standardi: IEC 60825-1

